



Lugol Neitum®

Solución de Lugol 2% - 10 ml

Envase con 10 viales

Indicado para:

- Examen endoscópico esofágico
- Colposcopia del cuello de útero




Solución Lugol Neitum® al 2 %, es una solución de Lugol al 2% (yodo al 2%) destinada a la detección de cánceres de células escamosas del esófago (por tinción durante la endoscopia esofágica) y del cuello uterino (test de Schiller).

Método y vía de administración:

Para uso durante la endoscopia y la colposcopia.

Examen endoscópico esofágico: comenzando desde el cardias, con la ayuda de un catéter con spray se pulveriza un máximo de 20 ml de solución sobre el esófago.

Colposcopia del cuello de útero: se extiende la solución con un apósito impregnado con 10 ml de la solución (test de Schiller).

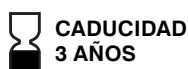

CADUCIDAD
3 AÑOS



UN SOLO USO



MANTENER PROTEGIDO
DE LA LUZ

Producto Sanitario
Clase IIa

CE
0459

Ref.: 851

Presentación: Envase de 10 viales



Laboratorios BOHM, S.A.

Laboratorios BOHM, S.A.
C/ Molinaseca, 23-25
28947 FUENLABRADA (Madrid)
Telf. +34 916421818
E-mail: info@bohms.es
www.bohms.es

FICHA TÉCNICA

Lugol Neitum® Lugol 2% - 10 ml

1 – Información del producto sanitario				
Nombre del producto	LUGOL 2% solución yodada			
Número(s) Catálogo del producto / Código(s)	Nombre comercial	Ref	Presentación	
	LUGOL NEITUM®	851	Estuche de 10 viales de 10 ml	
Clasificación MDD	Clase IIa			
Marcado CE	Acorde a la Directiva Europea 93/42/CEE, Anexo V			
Órgano Notificado	GMED (0459)			
Primer marcado	2009 bajo Directiva 2001/83/CE			
Composición	Yodo	2,1 g		
	Yoduro potásico	4,2 g		
	Agua para inyección	Cantidad suficiente para 100 ml		
	Componentes	Látex	☐ Sí	☒ No
		Productos de origen animal	☐ Sí	☒ No
		Ftalato / DEHP	☐ Sí	☒ No
		PVC	☐ Sí	☒ No
Esterilidad	Producto estéril	☐ Sí ☒ No		
	Número de usos	Un solo uso		
Presentación	La solución se presenta en ampollas de vidrio ámbar tipo I de 10 ml Estuches con 10 ampollas			
Uso	LUGOL 2% es una solución de Lugol al 2% (diyodo al 2%) destinada a la detección de cánceres de células escamosas del esófago (por tinción durante la endoscopia esofágica) y del cuello uterino (test de Schiller), cánceres cuyo pronóstico puede ser grave o incluso mortal si no se detectan en estadios tempranos.			
Población diana	Todos los pacientes en los que se necesita un diagnóstico de cáncer.			
Método y vía de administración	Para uso durante la endoscopia y la colposcopia. Para la endoscopia, comenzando desde el cardias, rocíe el esófago con no más de 20 ml de solución de Lugol al 2%. Para la colposcopia, frote el cuello uterino con una compresa empapada con 10 ml de solución de Lugol al 2% (prueba de Schiller). Las ampollas abiertas o parcialmente utilizadas deben desecharse después del procedimiento. No utilice una ampolla abierta para otro paciente.			
Advertencias y precauciones de uso	La solución de Lugol puede provocar broncoespasmo cuando se utiliza durante una endoscopia gástrica. Evitar su aplicación cerca del esfínter esofágico superior. Se trata de ampollas de un solo uso. Las ampollas abiertas o parcialmente utilizadas deben desecharse. Administrar betabloqueantes a pacientes con riesgo de reacción anafiláctica puede agravar la situación. En pacientes con un depósito de yodo tiroideo reducido o cuando el nivel previo de captación de yodo por la tiroides está aumentado: situaciones de deficiencia de yodo, tiroiditis, hipertiroidismo, tiroidectomía parcial, edad joven.			
Contraindicaciones	Alergia al yodo Embarazo y lactancia			

2 – Datos logísticos		
Caducidad	3 años	
Condiciones de almacenamiento	Almacenar por debajo de 30°C y protegido de la luz	
Datos del embalaje	Código de barras Referencia Número de lote Fecha de caducidad	☒ Sí ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒ Sí ☐ No
Presentación		

3 – Información del fabricante	
Nombre	LABORATOIRES FRILAB
Dirección	104 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris France Tel : +33 1 81 79 38 75 Email : info@frilab.fr
Contacto notificación incidentes (vigilancia)	pharmacovigilance@frilab.fr

4 – Información del distribuidor en España	
Nombre	Laboratorios BOHM, S.A.
Dirección	C/ Molinaseca 23, Polígono Cobo Calleja 28947 - Fuenlabrada (Madrid), España Tel : +34 91 642 18 18 Email : info@bohm.es